




Sidst revideret Maj 2024

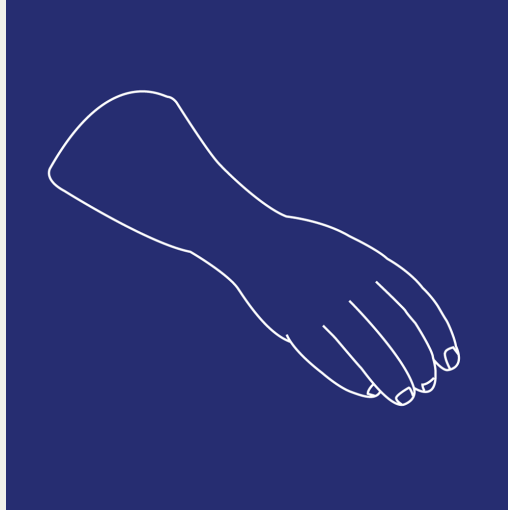

Brugervejledning

Kosmetisk/æstetisk
delhånds-protese
(fingerprotese)

SN

REF



Sahva A/S – Nykær 68, 2605 Brøndby



Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om din nye æstetiske protese, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af protesen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugsvejledningen grundigt igennem.

Æstetiske proteser skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for proteser, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

Funktion

Kosmetisk og som hjælp til øget grebsfunktion, da protesen fungerer som opposition - det vil sige hjælp til den anden side - og dermed skaber et modhold. Endvidere som hjælp ved tastearbejde.

Indikation

Ved vristamputation, delhåndsamputation, finger-amputation med god stumplængde.

Materialer

Homogen silikone, negle i akryl.

Holdbarhed/levetid for varige produkter

Protesen forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt.

For børn, der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til seks måneder.

Brug af produktet

Påtagning

Ved lang stump tages håndlotion (uden allergifremkaldende stoffer) på stumpen, og protesen skrues langsomt på (fra side til side). Ved kort stump fugtes denne med vand eller sprit, og protesen skrues på. Det er vigtigt, at protesen er helt i bund og sidder korrekt, samt at der ingen luft er tilbage indvendigt. Det er vigtigt, at protesen IKKE trykkes på, da den så kan revne. Husk altid at skubbe den på som beskrevet ovenfor.

Aftagning

Der dannes en lille luftlomme ved at knibe en "hudfold" i protesen; dette gør, at du forsigtigt kan skubbe protesen af. Der kan eventuelt anvendes sæbevand, der hældes ned i folden, hvorefter protesen skubbes af. Ved en lang stump kan det være svært at knibe en "hudfold", og en strikkepind kan med fordel anvendes til at slippe luft ind

Pleje af huden

Huden vaskes med mild sæbe uden allergifremkaldende stoffer og smøres med mild lotion. Ved hudforandringer kontakt egen læge eller Sahva. Det er vigtigt, at protesen ikke bruges om natten.

Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen. Alt sammen kan være med til at ændre protesens pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at protesens pasform er forringet.



Særlige risici

Der kan opstå hudgener, hvis hygiejnen ikke er god.

Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

Rengøring

Protesen vaskes som ved almindelig håndvask med mild sæbe uden farvestof og parfume. Der kan med jævne mellemrum anvendes sprit til at rengøre protesen.

Vedligeholdelse

Protesen kan få permanente misfarvninger som følge af cigaretrøg, læder- og stoffarver, spritpenne og trykssvæerte fra aviser. Forsøg at undgå disse ting på protesen. I tilfælde af at protesen får revner, eller at neglen løsner sig, må du ikke reparere den selv. Kontakt i stedet Sahva. Anvendes neglelak er det vigtigt, at det kun kommer på neglen. Anvend kun neglelakkfjerner UDEN acetone. Protesen bør ikke opbevares i nærheden af børn eller kæledyr

Bortskaffelse/returnering

Når den æstetiske protese ikke længere passer eller er slidt op, kan den afleveres til Sahva.

Reparation/Fornyelse af produkt

Ansøgningsregler

Hvis du skal have repareret eller fornyet din æstetiske protese, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt protesen.

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje. Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres,

fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.

Sahva opfylder gældende EU-krav til medicinske produkter

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de gældende krav for medicinsk udstyr i klasse I og lever op til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/745.

Som producent og distributør af medicinsk udstyr, bekræftes det herved, at Sahva efterlever de gældende krav for individuelt fremstillede produkter efter mål.

Sahva afgiver således en patienterklæring iht. bilag XIII i nævnte EU-Forordning.

Patienterklæringen kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Sahva.

Det er også vigtigt at hvis der opleves fejl, svigt og mangler ved produktet, bør dette indberettes til Sahva.

